

— ABSORBABLE THREADED SUTURE
ANCHOR

MEMOSORB™



SURGICAL TECHNIQUE



groupe lépine

Depuis 1714


MEMOSORB™ SYSTEM

- The MEMOSORB™ system was designed to reattach soft tissues (tendon or ligament) to bone.
- Each anchor is supplied on an implant holder and with a single-use tap that will be used to prepare the fixation point in bone.


PLANNING

- Plan the position of the anchor near the soft tissues being reattached.
- For an effective hold, the anchor must cross one bone cortex (monocortical hold).


TAPPING

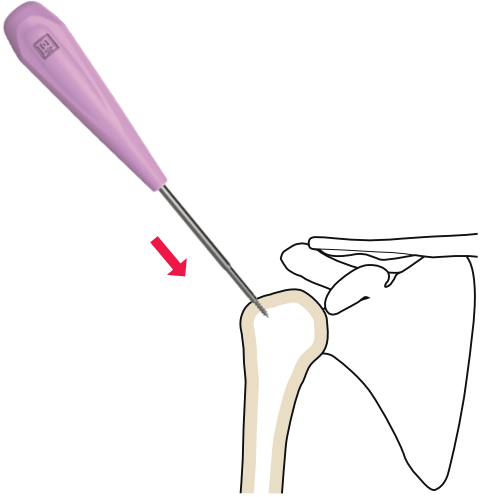



- Prepare the hole using the single-use tap (pink handle) by inserting it to the depth reference mark.

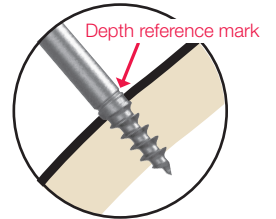


PLACEMENT OF DEFINITIVE IMPLANT

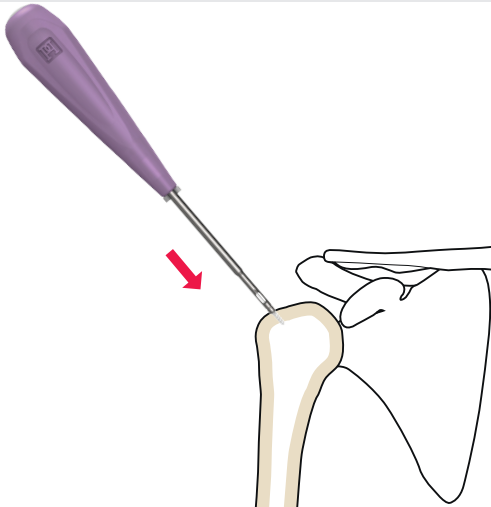


- Using the implant holder (purple handle), screw the anchor until the depth mark is reached.
- Release the sutures and needles from the implant holder.
- Check the anchor's hold in the bone. Make sure the suture slides in the eyelet and that it does not get cut on a sharp bone edge.

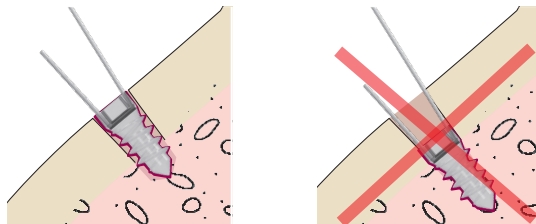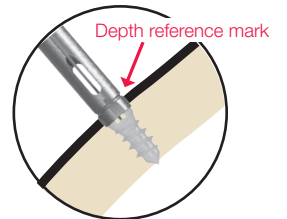

SUTURE

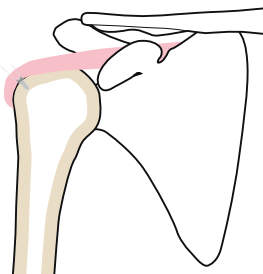

- Reattach the soft tissues using one (or more) of the suture/needle combinations, then knot them to bring the soft tissues as close as possible to the anchor. Finish by tightening the suture knots.
- Depending on the size of the tissue fragment being repaired, several anchors may be needed to ensure effective reattachment.

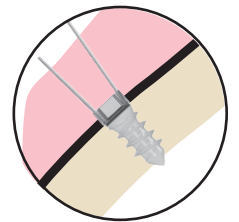

lépine Algérie
9 rue philosophe Tabrizi
Les sources
Bir Mourad Rais - ALGER
lepine-algerie@groupe-lepine.com

lépine Deutschland
Ohle Ring 23-25
Stade-Wiepenkathen, 21684
lepine-deutschland@groupe-lepine.com

lépine Ibérica
J.J. Tadeo Murguía, 3 y 5 Bajos
20304 IRÚN (GUIPÚZCOA)
lepine-iberica@groupe-lepine.com

175 rue Jacquard - CS 50307
69727 Genay Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 72 33 02 95
Fax +33 (0)4 72 35 96 50

lépine Italia
Via Cassanese 100,
20090 Segrate (Milano)
lepine-italia@groupe-lepine.com

lépine Maroc
79 avenue IBN SINA
10080 RABAT - AGDAL
lepine-maroc@groupe-lepine.com

www.groupe-lepine.com


groupe lépine

Depuis 1714